



**คู่มือการใช้งาน
INSTRUCTION MANUAL
Massage Chair**

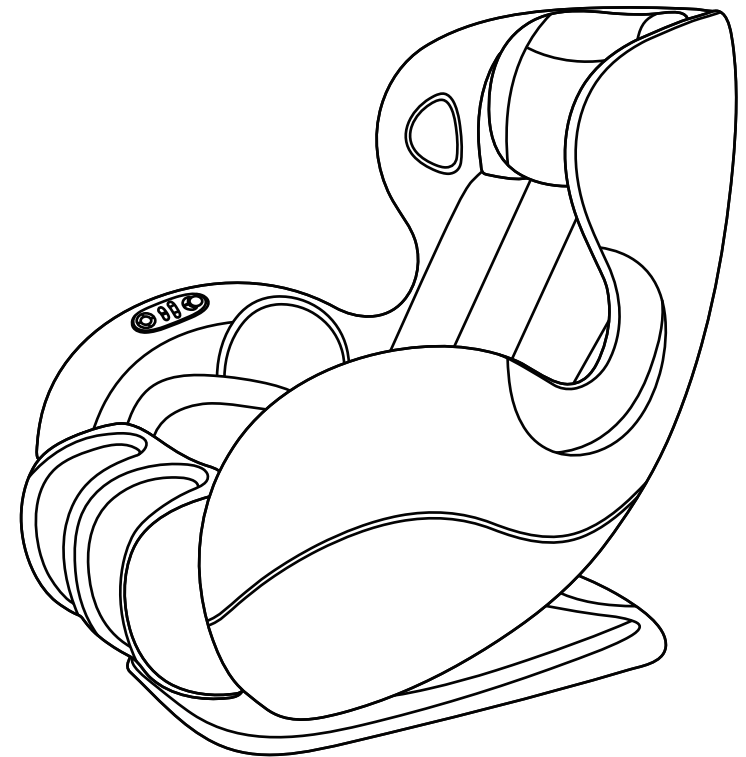

- Please read the user manual carefully before use.
- The appearance of the product is subject to the actual product.
- In case of technical or software upgrades, these changes will be made without further notification.

ข้อมูลจำเพาะ

Model	RV-3838
Rated Voltage	100-240V~
Rated Frequency	50-60Hz
Rated Power	110W
Upright position-Approximately	1165x665x1035mm
Reclined position-Approximately	1405x665x835mm

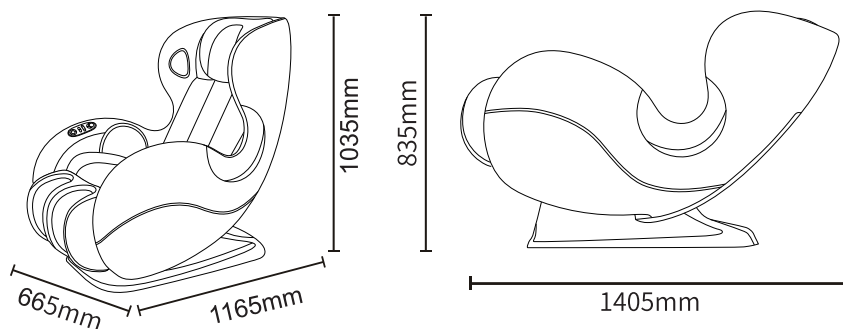

ขอขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อเข้าใจคำแนะนำอย่างครบถ้วน โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด และเก็บไว้อ้างอิงในอนาคต ขอสงวนสิทธิ์ในการอธิบาย ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์

สารบัญ

ความปลอดภัย	1-6
การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน	7-9
เลื่อนเก้าอี้	7
วางเก้าอี้	7
เชื่อมต่อพลังงาน	8
ส่วนประกอบ	9-12
โครงสร้างด้านนอก	9
ตัวควบคุม	10
หน้าที่ของคอนโทรลเลอร์	11-12
การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	13
แก้ไขปัญหา	14
ข้อมูลจำเพาะ	15

ความปลอดภัย

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

เก้าอี้ชนิดนี้มีไว้สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น เมื่อใช้งานควรปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานเสมอรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ :

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้เก้าอี้ตัวนี้

อันตราย

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต :

- 1.) ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบทันทีหลังจากใช้งานและก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
- 2.) ห้ามใช้หมุดหรือตัวยึดโลหะอื่นๆ กับเครื่องนี้
- 3.) ตรวจสอบเครื่องอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนใช้งาน งดการใช้งานหากสภาพเครื่องมีความชำรุดเสียหาย
- 4.) ดูแลเครื่องให้อยู่สภาพแห้ง อย่าใช้ในสภาพเปียกหรือแห้ง

คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ การบาดเจ็บต่อบุคคล:

- 1.) ไม่ควรทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้โดยไม่มีใครดูแลเมื่อเสียบปลั๊กไฟ ถอดปลั๊กออกเมื่อไม่ใช้งานและก่อนที่จะใส่หรือถอดชิ้นส่วนออก
- 2.) ห้ามใช้งานใต้ผ้าห่ม หมอน อาจเกินความร้อนสูงเกินไป อาจเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต
- 3.) จำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้งานเครื่องนี้โดยเด็ก คนพิการ ให้ส่วนนวดเท้าอยู่ห่างจากเด็ก
- 4.) ใช้เครื่องนี้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานตามที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น อย่าใช้ร่วมกับคู่มือของผลิตภัณฑ์อื่น
- 5.) ห้ามใช้งานหากมีสายหรือปลั๊กชำรุด เครื่องอาจทำงานไม่ถูกต้อง หากทำตกเสียหาย หล่นจากที่สูง หล่นในน้ำ ส่งเครื่องกลับไปศูนย์บริการหรือซ่อมแซม
- 6.) อย่าย้ายเครื่องด้วยการดึงหรือลากสายไฟ
- 7.) เก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่ร้อน
- 8.) ห้ามปิดช่องระบายอากาศเมื่อใช้งานเครื่องอยู่ ปราศจากสิ่งของปิดกั้น ผ้า ผม ฯลฯ
- 9.) อย่าวางหรือแทรกอุปกรณ์ใดๆ ลงในช่องเปิด

แก้ไขปัญหา

หากยังเกิดความผิดปกติหลังจากตรวจสอบดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โปรดถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบและติดต่อศูนย์บริการ

สถานการณ์	แนวทางแก้ไข
เก้าอี้ชนิดนี้ไม่สามารถทำงานได้แม้ว่าจะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแล้วก็ตาม	• ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟเชื่อมต่อและใช้งานได้หรือไม่ • ตรวจสอบว่าสวิตช์บนเก้าอี้ชนิดนี้ไปที่ตำแหน่ง “ I ” หรือไม่
ในระหว่างการใช้งานคอนโทรลเลอร์ทำงานแต่เก้าอี้ชนิดนี้ไม่ทำงาน	• เก้าอี้ชนิดนี้อาจร้อนเกินไปหลังจากใช้เป็นเวลานาน เก้าอี้ชนิดนี้จะเย็นลงอัตโนมัติเพื่อกลับสู่สภาพปกติ กรุณาปิดเครื่องพักไว้ประมาณ 30-50 นาที
ในระหว่างการใช้งานคอนโทรลเลอร์และเก้าอี้ชนิดนี้ไม่ทำงาน	• หากเวลาที่ตั้งไว้เสร็จสมบูรณ์โปรดกดฟังก์ชันจับเวลาอีกครั้งเพื่อดำเนินการต่อ ปิดและเปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อใช้งาน

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

วิธีการบำรุงรักษา

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต :

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนหนังและพลาสติก

- โปรดตรวจสอบว่าสวิตช์หลักปิดอยู่และถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
- จุ่มผ้าแห้งนุ่มๆ ในน้ำหรือน้ำอุ่นที่มีน้ำยาทำความสะอาดเล็กน้อย(3-5%) บิดน้ำออกและเช็ดให้ทั่ว
- ทำความสะอาดชิ้นส่วนหนังและพลาสติก
- จากนั้นเช็ดออกด้วยผ้าแห้งนุ่ม
- ปลอ่ยให้แห้งตามธรรมชาติ

คำเตือน


- อย่าใช้แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน สารเคมีอื่นๆ ในการทำความสะอาด
- อย่าทำให้พื้นผิวแห้งด้วยเครื่องเป่าลม
- ห้ามใช้เตารีด
- ในระหว่างการบำรุงรักษาเครื่องควรถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งและอย่าถอดด้วยมือเปียก
- โปรดใช้ผ้าคลุมกันฝุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นหากคุณไม่ได้ใช้นานเป็นเวลานาน
- ระวังกางเกงหรือผ้าเดนิมเนื่องจากสีของเสื้อผ้าอาจเปลี่ยนสีของหนังเก้าอี้หนัง
- เช็ดผลิตภัณฑ์ด้วยโฟมเมลามีนจุ่มน้ำหรือน้ำยาจางๆ เช็ดคราบสกปรกออกยาก
- อย่าให้พลาสติกสัมผัสกับหนังที่มีสีจาง
- อุณหภูมิไม่ควรเกิน 40 องศา



อย่าใช้สารเคมีต่างๆ
กับเครื่อง



อุณหภูมิที่ใช้
ทำความสะอาด
ไม่ควรเกิน 40 องศา

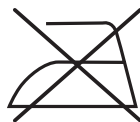

อย่าใช้เตารีด

ความปลอดภัย

- 10.) อย่าใช้งานกลางแจ้ง
- 11.) ห้ามใช้งานในบริเวณที่มีผลิตภัณฑ์ระเหย (สเปรย์) หรือสถานที่ให้ออกซิเจน
- 12.) ในการตัดการเชื่อมต่อให้หมุนปุ่มควบคุมไปที่ตำแหน่งปิด จากนั้นถอดปลั๊กไฟออก
- 13.) อุณหภูมิที่สูงพอที่จะทำให้เกิดการไหม้ได้โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าการควบคุม ห้ามใช้งานกับทารก ผู้ที่นอนหมดสติ ห้ามใช้กับผิวหนังที่มีความบอบบางหรือ ผู้ที่มีการไหลเวียนโลหิตไม่ดี ตรวจสอบผิวหนังที่สัมผัสกับบริเวณที่รื้อของเครื่อง บ่อยๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการพองของผิวหนัง
- 14.) หลีกเลี่ยงขอบมุมแหลมคม
- 15.) อย่าใช้งานเก้าอี้ชนิดใกล้เคียงกับเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับ
- 16.) เก็บขมยารให้ห่างจากเครื่อง
- 17.) เก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่ร้อน
- 18.) ห้ามปิดช่องระบายอากาศเมื่อใช้งานเครื่องอยู่ ปราศจากสิ่งของปิดกั้น ผ้า ผม ฯลฯ ห้ามวางสิ่งของที่บรรจุของเหลวบนเก้าอี้หนัง
- 19.) อุปกรณ์นี้มีโครงสร้างที่มีการต่อสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว
- 20.) ตัวเชื่อมต่อไฟฟ้าใช้เป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ และอุปกรณ์ปลดการเชื่อมต่อ จะยังคงใช้งานต่อง่าย
- 21.) เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีไว้สำหรับบุคคล(รวมถึงเด็ก)ที่มีความสามารถทางร่างกายสมบูรณ์ ผู้ที่มีประสาทสัมผัส จิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้วันแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย การดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
- 22.) หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานหรือหลังการใช้งานโปรดปิดเครื่องและดึงปลั๊กออก
- 23.) อย่าทำให้เสียหาย หักงอ บิดงอ สายไฟหรือปลั๊ก
- 24.) เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้และบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกายที่มีประสาทสัมผัส จิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้วันแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน ให้เข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง ห้ามเด็กเล่นเครื่องนี้ ห้ามเด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาโดยไม่มีผู้ดูแล

ความปลอดภัย

โปรดจดจำคำแนะนำเหล่านี้

เก้าอี้นวดมีไว้ใช้สำหรับในครัวเรือนเท่านั้น

- สภาพแวดล้อมการใช้งาน
 - อย่าใช้เก้าอี้นวดในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นหรือฝุ่นมากเกินไป เพราะอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ
 - ห้ามใช้เก้าอี้นวดในห้องที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 104°F ขึ้นไป
 - อย่าให้เก้าอี้นวดสัมผัสกับเครื่องทำความร้อน เตา แสงแดดโดยตรง
 - วางและใช้งานเก้าอี้นวดบนพื้นกันลื่น
 - เก้าอี้นวดถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในบ้านไม่ใช่เพื่อการค้า

⚠ ข้อควรระวัง

- เก้าอี้นวดต้องใช้ภายในอาคารเท่านั้น
- หากคุณใช้เก้าอี้ในห้องเย็นอย่าเพิ่มอุณหภูมิอย่างกะทันหัน ขอแนะนำให้เพิ่มทีละน้อยจนถึงระดับปกติ
- หากเก็บเก้าอี้นวดไว้ในที่เย็นและนำเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ขอแนะนำให้อุ่นอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากอาจมีหยดน้ำบนกลไกชิ้นส่วน เนื่องจากการควบแน่น การใช้งานในสภาวะดังกล่าวอาจทำให้ทำงานผิดปกติ

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

- **ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย**
 - เพื่อให้แน่ใจว่าใช้เก้าอี้นวดได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง อย่าใช้งานโดยไม่อ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
 - ห้ามใช้เก้าอี้นวดเมื่อถอดเบาะออก อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำงานผิดปกติ
 - อย่าใช้เก้าอี้นวดร่วมกับอุปกรณ์การรักษารักษาอื่นๆ หรือผ้าห่มไฟฟ้า ฯลฯ เพราะอาจทำให้ไม่ได้ผล บาดเจ็บ
 - ห้ามใช้เก้าอี้นวดก่อนหรือหลังรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง อาจมีผลเสียต่อผู้ใช้
 - อย่าให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงเล่นรอบเก้าอี้นวด เช่น พนักพิง ที่รองขา ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ

ส่วนประกอบ

หน้าที่ของคอนโทรลเลอร์

ฟังก์ชัน		คำอธิบาย	ระดับ
อุณหภูมิ	สดชื่น Refreshing	โดยการนวดขัดสีที่บ้นท้ายและต้นขา ระดับปานกลาง-อ่อนโยน เพื่อช่วยฟื้นฟู	ต่ำ
	แกว่ง Swing	ถูกลมนิรภัยที่นุ่มนวลและเป็นจังหวะ บีบสะโพกและขาพร้อมกับแกว่ง	ต่ำ
	สปา SPA	นวดด้วยถูกลมนิรภัยทั้งตัวและลูกกลิ้ง แท็กกลไก 3 มิติ ช่วยให้รู้สึกสบาย	ปานกลาง
การนวด	คอและไหล่ Neck&Shoulder	เน้นที่ไหล่และคอความเข้มข้นปานกลาง เทคนิคคือการนวดและแตะซึ่งช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ	ปานกลาง
	เอวและหลัง Waist&Back	เน้นนวดหลังความเข้มข้นปานกลาง โดยการนวดและการตบ	ต่ำ
	บาง Slim	เน้นไปที่การนวดสะโพก โดยเน้นความนุ่มนวลร่วมกับถูกลมนวดที่สะโพก	ปานกลาง


ส่วนประกอบ

หน้าที่ของคอนโทรลเลอร์

ฟังก์ชัน	สัญลักษณ์	คำอธิบาย
Power		โดยการกดปุ่มที่ปุ่มท้ายและต้นขา ระดับปานกลาง-อ่อนโยน เพื่อช่วยฟื้นฟู
Up / Down		โหมดอัตโนมัติเพื่อตรวจพบตำแหน่งไหล่ให้กดปุ่มนี้ค้าง ปรับ ขึ้น-ลง
		
Pause		กดปุ่มนี้เพื่อหยุดชั่วคราว/เริ่ม
Intensity		กดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มหรือลดความเข้มข้นของอุณหภูมิ
Heat		กดปุ่มนี้ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มฟังก์ชันทำความร้อน
Back up / Back down		เมื่อเปิดเครื่องให้กดปุ่มนี้เพื่อปรับพนักพิงขึ้นและลง หลังจากปล่อยปุ่มจะหยุด
Refreshing		กดปุ่มนี้เมื่อต้องการนวด โหมดสดชื่น
Swing		กดปุ่มนี้เมื่อต้องการนวด โหมดแกว่ง
SPA		กดปุ่มนี้เมื่อต้องการนวด โหมดสปา
Partial Care		กดปุ่มนี้เมื่อต้องการนวด นวดบางส่วน

การจับคู่สัญญาณบลูทูธ

เลือกรายการบลูทูธในโทรศัพท์ของคุณ
เลือกที่ “R8526” เสียงสัญญาณดัง
แสดงว่าเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

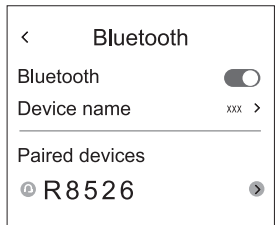

ความปลอดภัย

- อย่าวางของบนเก้าอี้นวด เพราะอาจทำให้ทำงานผิดปกติหรือบาดเจ็บได้
- อย่าใช้เก้าอี้นวดเมื่อร่างกายของคุณเปียก
- ห้ามใช้เก้าอี้นวดขณะที่มือคุณเปียก
- ไม่แนะนำให้ใช้นวดนานเกิน 30 นาที
- อย่านวดในจุดเดียวนานเกิน 5 นาที/ครั้ง เพราะอาจทำให้ได้รับแรงกระตุ้นมากเกินไป และอาจก่อให้เกิดผลร้าย
- อย่าสอดมือและเท้าของคุณไปตามทางของลูกกลิ้งนวดในระหว่างการใช้งาน เพราะอาจทำให้ได้รับการบาดเจ็บ
- หยุดการทำงานทันทีหากคุณรู้สึกไม่สบายตัว
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับรักษาด้วยตนเอง ควรได้รับการจัดการโดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
- ผู้ที่รับประทานยาหรือมีอาการป่วย โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งาน
- กรุณาอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ หาก你不สบาย
- ถอดผ้าพันคอ สร้อย เครื่องประดับทั้งหมดออก ก่อนใช้เก้าอี้นวด

ผู้ที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์

- ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้
- การใช้งานอยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์
 - มีความผิดปกติของกระดูกสันหลัง ภาวะกระดูกสันหลังผิดปกติ หรือบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
 - ผู้ที่มีปัญหาที่หลัง
 - เป็นโรคเบาหวาน กระดูกพรุน ประสาทสัมผัสบกพร่อง
 - มีความผิดปกติของข้อต่อ
 - มีเครื่องกระตุ้นหัวใจ หรืออุปกรณ์การแพทย์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
 - ตั้งครรภ์
 - มีอาการกระดูกอ่อนหรือลิ่มเลือดอุดตัน
 - มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเกิดลิ่มเลือด
 - ฟังได้รับการผ่าตัด
 - มีหมอนผ่าตัด สกรู หรืออะไรก็ตามที่ฝังอยู่ในร่างกาย

ความปลอดภัย

กรณีที่ไม่ควรใช้เก้าอี้นวด

ในเหตุการณ์ต่อไปนี้ โปรดปิดสวิตซ์ไฟหลักทันทีและถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบ :

- หากน้ำหกลงบนเก้าอี้นวดโดยไม่ตั้งใจ อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำงานผิดปกติได้
- ผ้าของพนักพิงฉีกขาดและเห็นส่วนประกอบภายใน
- รู้สึกเจ็บหรือไม่สบายระหว่างการนวดในหยุดการทำงานทันทีไปปรึกษาแพทย์
- เมื่อรู้สึกพบความผิดปกติหรืออาการผิดปกติอื่นๆ ระหว่างการใช้งาน
- หากเกิดไฟฟ้าช็อตช็อก การบาดเจ็บอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
- หากฟ้าผ่า

การประกอบและซ่อมเก้าอี้นวด


- อย่าถอดที่หุ้มพนักพิงของเก้าอี้นวด การสัมผัสส่วนประกอบภายในอาจทำให้ทำงานผิดปกติหรือไฟฟ้าช็อตได้
- เก้าอี้นวดได้รับการซ่อมแซมโดยมืออาชีพเท่านั้น อย่าถอด ประกอบ หรือซ่อมแซมด้วยตัวเอง

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปลั๊กไฟและสายไฟ

- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) ตรงกับข้อมูลของเก้าอี้นวดหรือไม่
- อย่าเชื่อมต่อหรือถอดปลั๊กไฟออกเต้าเสียบด้วยมือเปียก ซึ่งอาจส่งผลให้เครื่องทำงานผิดปกติหรือไฟฟ้าช็อต
- เมื่อถอดปลั๊กไฟให้ดึงโดยจับที่ปลั๊กไม่ดึงหรือกระชากสายไฟ
- แม้ว่าฟังก์ชันตั้งเวลาอัตโนมัติจะหยุดทำงานอัตโนมัติ แต่อย่าลืมปิดสวิตซ์ไฟหลักทุกครั้งหลังการใช้งาน
- อย่าวางสายไฟไว้ใต้เก้าอี้นวดหรือของหนัก
- อย่าพันสายไฟรอบเก้าอี้นวดเพราะอาจทำให้สายไฟเสียหายและอาจทำให้เกิดไฟดูด
- อย่าใช้เก้าอี้นวดหากสายไฟชำรุดเสียหาย
- อย่าใช้งานเก้าอี้นวดหากได้รับหลวม
- หากสายไฟชำรุดควรเปลี่ยนโดยศูนย์บริการของเรา

ส่วนประกอบ

คอนโทรลเลอร์


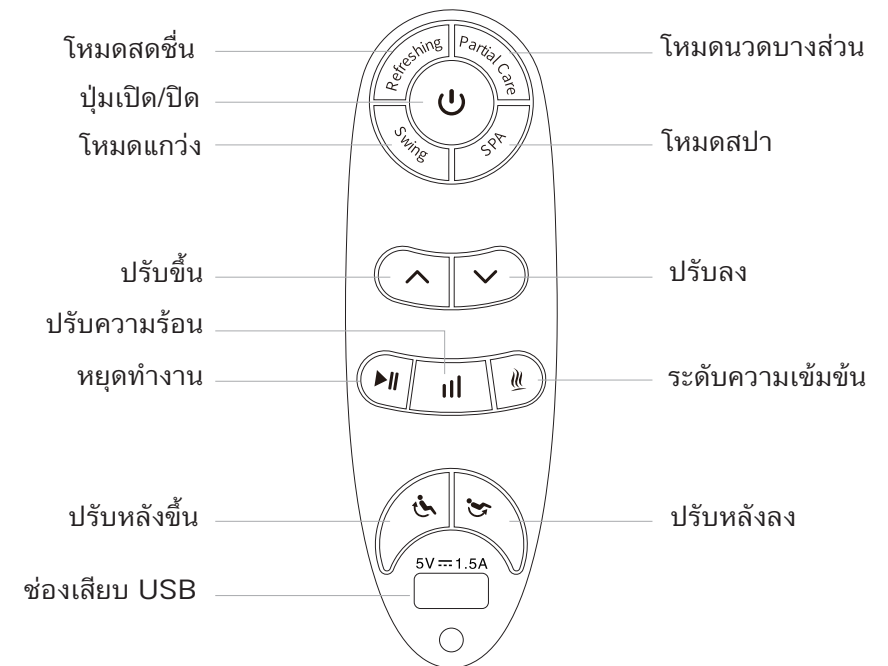


⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าเหยียบหรือวางของหนักบนคอนโทรลเลอร์
- อย่าวางคอนโทรลเลอร์ แนะนำให้ใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางเมื่อไม่ใช้งาน
- อย่าออกแรงที่ตัวควบคุมมากเกินไป
- อย่าจับตัวควบคุมขณะมือเปียก
- อย่าใช้งานคอนโทรลเลอร์โดยใช้ของมีคมหรือแข็ง อาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย

ส่วนประกอบ

โครงสร้างด้านนอก

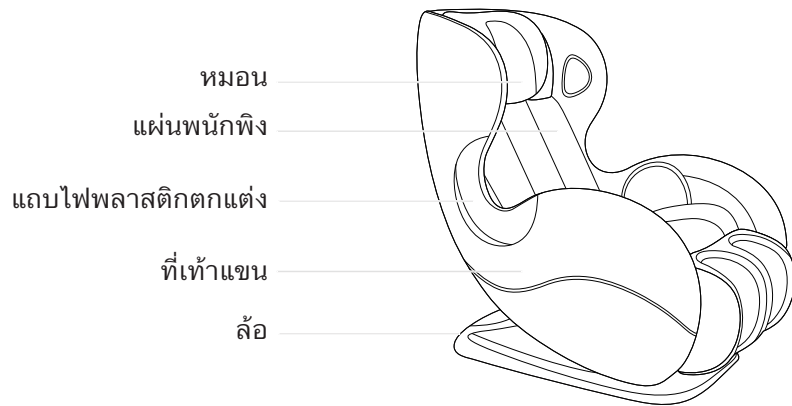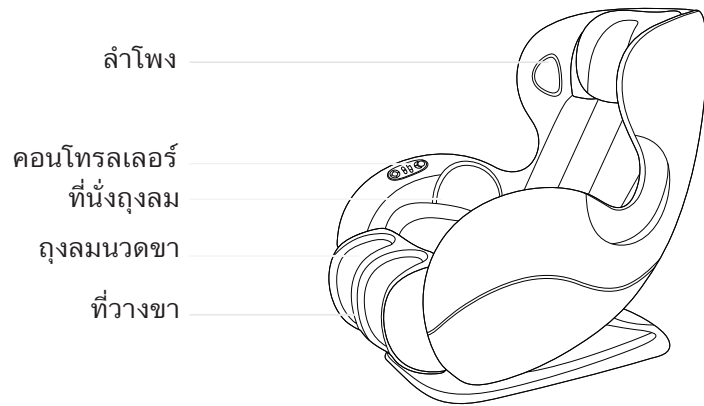

ความปลอดภัย


● คำแนะนำในการต่อสายดิน

ผลิตภัณฑ์นี้ต้องต่อสายดิน หากเกิดการทำงานที่ผิดปกติการต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด และผลิตภัณฑ์นี้มีสายไฟที่มีอุปกรณ์ต่อสายดินและปลั๊ก ควรเสียบเข้ากับเต้าเสียบและต่อสายดินที่เหมาะสม

อันตราย

การเชื่อมต่อต่อสายดินที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนใช้งาน หากที่บ้านของคุณปลั๊กไม่พอดีกับเต้าเสียบให้นำมาแก้ไขโดยศูนย์บริการ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการ


ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับกระแสไฟฟ้า 120 V และควรมีเต้าเสียบที่มีลักษณะคล้ายกับภาพด้านล่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับเต้าเสียบดีแล้ว และไม่ควรใช้เต้าเสียบร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น

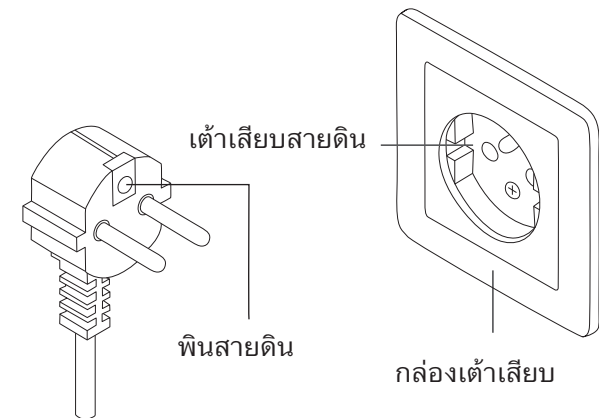

การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน


เลื่อนเก้าอี้

- กรุณาปิดไฟหลักและถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
- เอียงเก้าอี้ไปด้านหลังตามที่แสดงในภาพด้านล่างและหมุนเก้าอี้ไปตำแหน่งที่ต้องการ
- กรุณาปูผ้าหรือพรมสำหรับรองเครื่อง ป้องกันพื้นผิวชำรุดเสียหาย

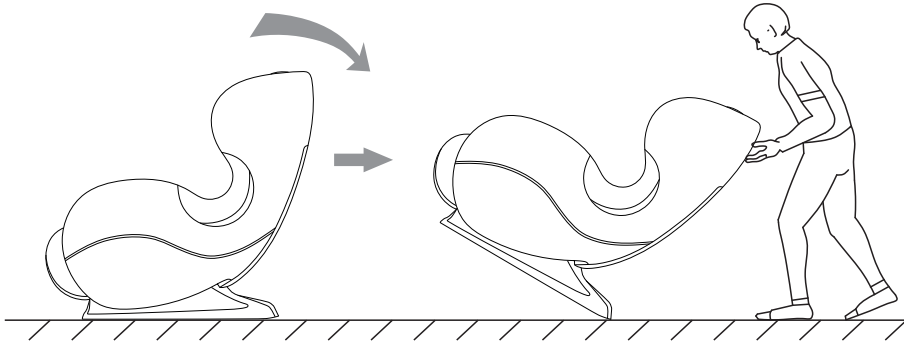

การวางเก้าอี้


โปรดเว้นพื้นที่ด้านหลัง 5 ซม. และด้านหน้า 35 ซม. เป็นอย่างน้อย เพื่อให้พนักงานสามารถปรับเอนเวลาใช้งาน

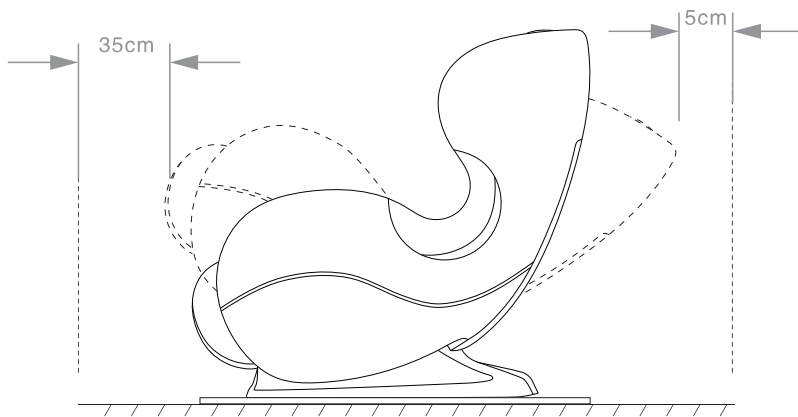

การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

การเชื่อมต่อ

- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบก่อนใช้งาน

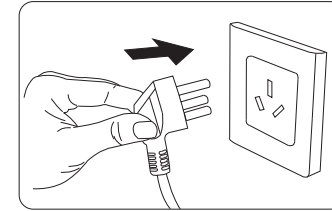

- เปิดสวิตช์ใช้งาน

