



AirMini

คุณสมบัติ/Specifications

- เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกแบบปรับแรงดันอัตโนมัติ (Auto CPAP) ตั้งแรงดันได้ช่วง 4-20 cmH₂O
- มีระบบ SmartStart การทำงานของเครื่องแบบอัตโนมัติ เมื่อใส่/ถอดหน้ากาก **หากใช้คู่กับหน้ากาก P10 มีโอกาสเครื่องไม่หยุดอัตโนมัติได้ เนื่องจากเครื่องจะหยุดเมื่อปล่อยแรงดันสูงมากกว่า 105 cmH₂O**
- มีฟังก์ชันช่วยผ่อนแรงดันขณะหายใจออก Expiratory Pressure Relief (EPR) สูงสุด 3 cmH₂O
- มีสัญลักษณ์แสดงความกระชับของการใส่หน้ากาก (Mask Seal)
- รองรับการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless module) ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์ 3G/4G และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ผ่านบลูทูธ
- ขนาดเครื่อง CPAP สูง 136 มม x ยาว 84 มม x กว้าง 52 มม
- น้ำหนักเครื่อง CPAP 300 กรัม
- ระดับเสียงการทำงานของเครื่อง 26.6 เดซิเบล **แต่อาจมีเสียงฟุ้งจากท่อรบกวนการนอนได้ ก่อนซื้อควรศึกษาหรือทดลองก่อนตัดสินใจ**
- Ramp Time ระบบตั้งเวลาหน่วง ตั้งแต่ 10, 5 ถึง 45 นาที หรืออัตโนมัติ



การติดตั้ง

- เชื่อมเครื่อง CPAP กับ Application AirMini ด้วยบลูทูธ
- วางอุปกรณ์บนพื้นผิวที่มีระดับที่มั่นคง หรือใช้ตัวยึดกับเตียง
- เสียบขั้วต่อสายไฟที่ด้านหลังของอุปกรณ์ เชื่อมต่อปลายสายไฟด้านหนึ่งเข้ากับหน่วยจ่ายไฟ และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
- ต่อท่อลมเข้ากับช่องระบายอากาศที่ด้านหลังของอุปกรณ์อย่างแน่นหนา
- ต่อปลายท่อลมที่วางเข้ากับหน้ากากที่ประกอบแล้วให้แน่น
- ใส่ตัวทำความชื้นในกระเปาะ
- กด Start/Stop เพื่อเริ่มการใช้งาน หรือ หายใจเข้า ออก เมื่อเปิดเมนู Auto Start

Mode

- CPAP โหมดปล่อยแรงดันคงที่
- AutoSet โหมดปล่อยแรงดันอัตโนมัติโดยเครื่องมี algorithm ที่คำนวณจาก 3 ลมหายใจหากเกิดภาวะหยุดหายใจหรือภาวะหายใจแผ่วเบาเครื่องจะปล่อยแรงดันรักษา
- AutoSet FH โหมดปล่อยแรงดันอัตโนมัติโดยเครื่องมี algorithm ที่คำนวณจาก 1 ลมหายใจหากเกิดภาวะหยุดหายใจหรือภาวะหายใจแผ่วเบาเครื่องจะปล่อยแรงดันรักษา โดยจะค่อยๆปล่อยแรงดันแรงดันจะค่อยๆเปลี่ยนและนุ่มนวล เพื่อป้องกันการตื่นระหว่างคืน

อุปกรณ์ที่ได้รับ

- เครื่อง Auto CPAP
- ชุดท่อ AirMini เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. โดย ชุดท่อ AirMini มีดังนี้
 1. P10 AirMini Mask Pack HumidX, HumidX Plus
 2. N20 AirMini Mask Pack HumidX, HumidX Plus
 3. N30 AirMini Mask Pack HumidX, HumidX Plus
 4. F20 AirMini Mask Pack ไม่ HumidX, HumidX Plus
- Adapter Power Supply Unit (Support Input range 110 - 240V, 20W)
- ถุงผ้าสีฟ้า-เทา ใส่เครื่อง (Travel bag)
- แผ่นกรองแบบ Standard
- คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย (User Manual EN/TH)



การอ่านผลที่หน้าเครื่อง

- เข้าดู Report การนอนได้ที่ Application AirMini



หมายเหตุ : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์



AirMini

Specifications

- Automatic positive pressure air compressor (Auto CPAP) can set the pressure in the range of 4-20 cmH2O.
- There is a SmartStart system for automatic machine operation. When putting on/taking off the mask **If used with the P10 mask, there is a chance that the machine may not stop automatically.** Because the machine will stop when the high pressure is released more than 105 cmH2O.
- There is a function to help relieve pressure while exhaling, Expiratory Pressure Relief (EPR) up to 3 cmH2O.
- There is a symbol showing the tightness of wearing a mask (Mask Seal).
- Supports wireless communication (Wireless module) via the 3G/4G telephone network and connects to the phone via Bluetooth.
- CPAP machine size: height 136 mm x length 84 mm x width 52 mm
- CPAP machine weight 300 grams
- The operating sound level of the machine is 26.6 **decibels, but there may be a loud hissing sound from the pipe that disturbs sleep. Before buying, you should study or try before making a decision.**
- Ramp Time Delay timer system from off, 5 to 45 minutes or automatic.



Mode

- CPAP Constant pressure release mode
- AutoSet Automatic pressure release mode where the machine has algorithm that calculates from 3 breaths if In the event of apnea or light breathing, the machine will Release treatment pressure
- AutoSet FH Automatic pressure release mode where the machine has algorithm that calculates from 1 breath if In the event of apnea or light breathing, the machine will Release treatment pressure By gradually releasing the pressure The pressure will change gradually and smoothly. to prevent waking during the night

อุปกรณ์ที่ได้รับ

- Auto CPAP
- AirMini pipe set, diameter 15 mm. The AirMini pipe set is as follows.
 - P10 AirMini Mask Pack HumidX, HumidX Plus
 - N20 AirMini Mask Pack HumidX, HumidX Plus
 - N30 AirMini Mask Pack HumidX, HumidX Plus
 - F20 AirMini Mask Pack Libu HumidX, HumidX Plus
- Adapter Power Supply Unit (Support Input range 110 - 240V, 20W)
- Travel bag
- Filter Standard
- User Manual EN/TH




Installation

- Connect the CPAP machine to the AirMini application with Bluetooth.
- Place the device on a stable, level surface. or use a bed mount
- Insert the power connector into the back of the device. Connect one end of the wire to the power supply unit. and the other end into an electrical outlet.
- Attach the air hose securely to the vent on the back of the device.
- Attach the free end of the air hose to the assembled mask tightly.
- Put the humidifier in the bulb.
- Press Start/Stop to begin use or breathe in and out when opening the Auto Start menu.

Reading results on the machine

- Access the sleep report at the AirMini application.

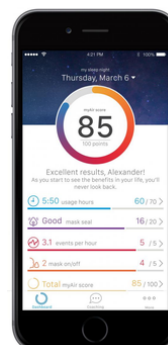

Note: Read the warnings on the label and medical device documentation.