




Mode

- CPAP โหมดปล่อยแรงดันคงที่
- AutoSet FH โหมดปล่อยแรงดันอัตโนมัติโดยเครื่องมี algorithm ที่คำนวณจาก 1 ามหายใจหากเกิดภาวะหยุดหายใจหรือภาวะหายใจแผ่วเบาเครื่องจะปล่อยแรงดันรักษา โดยจะค่อยๆปล่อยแรงดันแรงดันจะค่อยๆเปลี่ยนและนุ่มนวล เพื่อป้องกันการตื่นระหว่างคืน

AirSense 10 AutoSet For Her

คุณสมบัติ/Specifications

- เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกแบบปรับแรงดันอัตโนมัติ (Auto CPAP) ตั้งแรงดันได้ช่วง 4-20 cmH2O
- มีระบบ SmartStart การทำงานของเครื่องแบบอัตโนมัติ เมื่อใส่/ถอดหน้ากาก
- หน้าจอ LED สี ปรับความสว่างของหน้าจออัตโนมัติ ตามแสงภายในห้อง
- มีฟังก์ชันช่วยผ่อนแรงดันขณะหายใจออก Expiratory Pressure Relief (EPR) สูงสุด 3 cmH2O
- มีสัญลักษณ์แสดงความกระชับของการใส่หน้ากาก (Mask Seal)
- รายงานการนอน ระบุ Usage, Leak, Pressure, AI, HI, AHI, Cheyne-Stokes respiration, Hypopnoea, Central, Obstructive)
- รองรับการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless module) ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์ 3G/4G
- ขนาดเครื่อง CPAP สูง 116 mm x ยาว 255 mm x กว้าง 150 mm
- น้ำหนักเครื่อง CPAP 1284 กรัม
- ระดับเสียงการทำงานของเครื่อง 26.6 เดซิเบล
- เครื่องทำความชื้นมาพร้อมกับเครื่อง CPAP (HumidAir Cleanable)
- Ramp Time ระบบตั้งเวลาหน่วง ตั้งแต่ ปิด, 5 ถึง 45 นาที หรืออัตโนมัติ

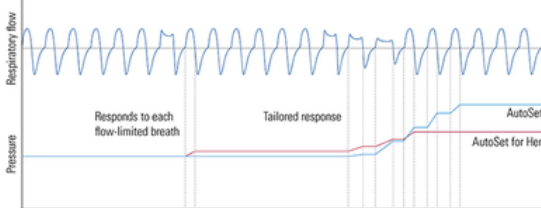

การติดตั้ง

- วางอุปกรณ์บนพื้นผิวที่มีระดับที่มั่นคง
- เสียบขั้วต่อสายไฟที่ด้านหลังของอุปกรณ์ เชื่อมต่อปลั๊กสายไฟ ด้านหนึ่งเข้ากับหน่วยจ่ายไฟ และปลั๊กอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
- ต่อท่อลมเข้ากับช่องระบายอากาศที่ด้านหลังของอุปกรณ์อย่างแน่นหนา
- ต่อปลายท่อลมที่วางเข้ากับหน้ากากที่ประกอบแล้วให้แน่น
- ใส่น้ำกลั่นทางการแพทย์ในกระบอกใส่น้ำแล้วใส่เครื่องให้แบบสมนึก
- กด Start/Stop เพื่อเริ่มการใช้งาน หรือ หายใจเข้า ออก เมื่อเปิดเมนู Auto Start

อุปกรณ์ที่ได้รับ

- เครื่อง Auto CPAP พร้อมเครื่องทำความชื้นแบบติดตั้งมากับเครื่อง
- กล้องใส่น้ำทำความชื้น (HumidAir Cleanable)
- ท่อลมแบบ ClimateLine ภายในเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.
- Adapter Power Supply Unit (Support Input range 110 - 240V, 90W)
- กระเป๋าใส่เครื่อง (Travel bag)
- แผ่นกรองแบบ Standard
- SD Card สำหรับบันทึกข้อมูล
- คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย (User Manual EN/TH)



การอ่านผลที่หน้าเครื่อง

- เช้าดู Report การนอนได้ที่ เมนู Sleep Report



หมายเหตุ : อ่านค่าเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์




Mode

- CPAP Constant pressure release mode
- AutoSet FH Automatic pressure release mode where the machine has algorithm that calculates from 1 breath if in the event of apnea or light breathing, the machine will Release treatment pressure By gradually releasing the pressure The pressure will change gradually and smoothly. to prevent waking during the night

AirSense 10 AutoSet For Her

Specifications

- Automatic positive pressure air compressor (Auto CPAP) can set the pressure in the range of 4-20 cmH2O.
- There is a SmartStart system for automatic machine operation. When putting on/taking off the mask
- Color LED screen, automatically adjusts screen brightness according to the light inside the room
- There is a function to help relieve pressure while exhaling, Expiratory Pressure Relief (EPR) up to 3 cmH2O.
- There is a symbol showing the tightness of wearing a mask (Mask Seal).
- Sleep report: Usage, Leak, Pressure, AI, HI, AHI, Cheyne–Stokes respiration, Hypopnoea, Central, Obstructive)
- Supports wireless communication (Wireless module) via 3G/4G telephone networks.
- CPAP machine size: height 116 mm x length 255 mm x width 150 mm
- CPAP machine weight 1284 grams
- The operating sound level of the machine is 26.6 decibels.
- The humidifier comes with a CPAP (HumidAir Cleanable) machine.
- Ramp Time Delay timer system from off, 5 to 45 minutes, or automatic.

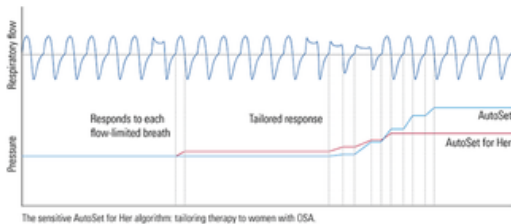

Received equipment

- Auto CPAP machine with built-in humidifier
- HumidAir Cleanable
- ClimateLine
- Adapter Power Supply Unit (Support Input range 110 - 240V, 90W)
- Travel bag
- Filter Standard
- SD Card
- User Manual EN/TH



Installation

- Place the device on a stable, level surface.
- Insert the power connector into the back of the device. Connect one end of the wire to the power supply unit. and the other end into an electrical outlet.
- Attach the air hose securely to the vent on the back of the device.
- Attach the free end of the air hose to the assembled mask tightly.
- Put distilled medical water in the water bottle and insert the unit tightly.
- Press Start/Stop to begin use or breathe in and out when opening the Auto Start menu.

Reading results on the machine

- Access your sleep report at the Sleep Report menu.



Note: Read the warnings on the label and medical device documentation.

