




AirSense 10 AutoSet

คุณสมบัติ/Specifications

- เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกแบบปรับแรงดันอัตโนมัติ (Auto CPAP) ตั้งแรงดันได้ช่วง 4-20 cmH2O
- มีระบบ SmartStart การทำงานของเครื่องแบบอัตโนมัติ เมื่อใส่/ถอด หน้ากาก
- หน้าจอ LED สี ปรับความสว่างของหน้าจออัตโนมัติ ตามแสงภายในห้อง
- มีฟังก์ชันช่วยผ่อนแรงดันขณะหายใจออก Expiratory Pressure Relief (EPR) สูงสุด 3 cmH2O
- มีสัญลักษณ์แสดงความกระชับของการใส่หน้ากาก (Mask Seal)
- รายงานการนอน เช่น Usage, Leak, Pressure, AI, HI, AHI, Cheyne-Stokes respiration, Hypopnoea, Central, Obstructive)
- รองรับการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless module) ผ่านระบบเครือข่าย โทรศัพท์ 3G/4G
- ขนาดเครื่อง CPAP สูง 116 mm x ยาว 255 mm x กว้าง 150 mm
- น้ำหนักเครื่อง CPAP 1284 กรัม
- ระดับเสียงการทำงานของเครื่อง 26.6 เดซิเบล
- เครื่องทำความชื้นมาพร้อมกับเครื่อง CPAP (HumidAir Cleanable)
- Ramp Time ระบบตั้งเวลาห้วง ตั้งแต่ 15, 5 ถึง 45 นาที หรืออัตโนมัติ

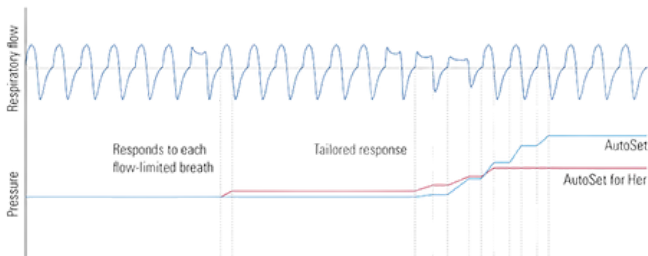

การติดตั้ง

- วางอุปกรณ์บนพื้นผิวที่มีระดับที่มั่นคง
- เสียบขั้วต่อสายไฟที่ด้านหลังของอุปกรณ์ เชื่อมต่อปลั๊กสายไฟ ด้านหนึ่งเข้ากับหน่วยจ่ายไฟ และปลั๊กอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
- ต่อท่อลมเข้ากับช่องระบายอากาศที่ด้านหลังของอุปกรณ์อย่างแน่นหนา
- ต่อปลายท่อลมที่วางเข้ากับหน้ากากที่ประกอบแล้วให้แน่น
- ใส่น้ำกลับทางการแพทย์ในกระบอกใส่น้ำแล้วใส่เครื่องให้แบบสมิท
- กด Start/Stop เพื่อเริ่มการใช้งาน หรือ หายใจเข้า ออก เมื่อเปิดเมนู Auto Start

Mode

- CPAP โหมดปล่อยแรงดันคงที่
- AutoSet โหมดปล่อยแรงดันอัตโนมัติโดยเครื่องมี algorithm ที่คำนวณจาก 3 ลมหายใจหากเกิดภาวะหยุดหายใจหรือภาวะหายใจแผ่วเบาเครื่องจะปล่อยแรงดันรักษา

อุปกรณ์ที่ได้รับ

- เครื่อง Auto CPAP พร้อมเครื่องทำความชื้นแบบติดตั้งมากับเครื่อง
- กล่องใส่น้ำทำความชื้น (HumidAir Cleanable)
- ท่อลมแบบ ClimateLine ภายในเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.
- Adapter Power Supply Unit (Support Input range 110 - 240V, 90W)
- กระเป๋าใส่เครื่อง (Travel bag)
- แผ่นกรองแบบ Standard
- SD Card สำหรับบันทึกข้อมูล
- คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย (User Manual EN/TH)



การอ่านผลที่หน้าเครื่อง

- เช้าดู Report การนอนได้ที่ เมนู Sleep Report




หมายเหตุ : อ่านค่าเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์



AirSense 10 AutoSet

Specifications

- Automatic positive pressure air compressor (Auto CPAP) can set the pressure in the range of 4-20 cmH2O.
- There is a SmartStart system for automatic machine operation. When putting on/taking off the mask
- Color LED screen, automatically adjusts screen brightness. according to the light inside the room
- There is a function to help relieve pressure while exhaling, Expiratory Pressure Relief (EPR) up to 3 cmH2O.
- There is a symbol showing the tightness of wearing a mask (Mask Seal).
- Sleep report: Usage, Leak, Pressure, AI, HI, AHI, Cheyne-Stokes respiration, Hypopnoea, Central, Obstructive)
- Supports wireless communication (Wireless module) via 3G/4G telephone networks.
- CPAP machine size: height 116 mm x length 255 mm x width 150 mm
- CPAP machine weight 1284 grams
- The operating sound level of the machine is 26.6 decibels.
- The humidifier comes with a CPAP (HumidAir Cleanable) machine.
- Ramp Time Delay timer system from off, 5 to 45 minutes or automatic.

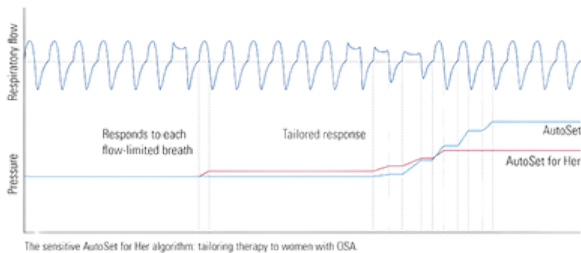

The sensitive AutoSet for Her algorithm: tailoring therapy to women with USA.

Mode

- CPAP Constant pressure release mode
- AutoSet Automatic pressure release mode where the machine has algorithm that calculates from 3 breaths if it occurs In the event of apnea or light breathing, the machine will Release treatment pressure

Received equipment

- Auto CPAP , (HumidAir Cleanable)
- ClimateLine
- Adapter Power Supply Unit (Support Input range 110 - 240V, 90W)
- Travel bag
- Filter Standard
- SD Card
- (User Manual EN/TH)



Reading results on the machine

- Access your sleep report at the Sleep Report menu.



Installation

- Place the device on a stable, level surface.
- Insert the power connector into the back of the device. Connect one end of the wire to the power supply unit. and the other end into an electrical outlet.
- Attach the air hose securely to the vent on the back of the device.
- Attach the free end of the air hose to the assembled mask tightly.
- Put medical distilled water in the water bottle and insert the unit tightly.
- Press Start/Stop to begin use or breathe in and out when opening the Auto Start menu

Note: Read the warnings on the label and medical device documentation.

