




AirStart 10 APAP

คุณสมบัติ/Specifications

- เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกแบบปรับแรงดันอัตโนมัติ (Auto CPAP) ตั้งแรงดันได้ช่วง 4-20 cmH2O
- **ไม่มีระบบ** SmartStart การทำงานของเครื่องแบบอัตโนมัติ เมื่อใส่/ถอด หน้ากาก
- หน้าจอ LED สี ปรับความสว่างของหน้าจออัตโนมัติ
- มีฟังก์ชันช่วยผ่อนแรงดันขณะหายใจออก Expiratory Pressure Relief (EPR) สูงสุด 3 cmH2O
- มีสัญลักษณ์แสดงความกระชับของการใส่หน้ากาก (Mask Seal)
- รายงานการนอน ระบุ Usage, Leak, Pressure, AI, HI, AHI,
- **ไม่รองรับ** การสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless module) ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์ 3G/4G
- ขนาดเครื่อง CPAP สูง 116 mm x ยาว 255 mm x กว้าง 150 mm
- น้ำหนักเครื่อง CPAP 1208 กรัม
- ระดับเสียงการทำงานของเครื่อง 26.6 เดซิเบล
- เครื่องทำความชื้นมาพร้อมเครื่อง CPAP (HumidAir Cleanable)
- Ramp Time ระบบตั้งเวลาหน่วง ตั้งแต่ 5 ถึง 45 นาที **ไม่มี อัตโนมัติ**
- **ผลการนอนไม่มีแบบ Detailed report**

| Therapy | | | |
|--|----------------|-----------------------|---------------|
| Pressure - cmH2O | Median: 5.1 | 95th percentile: 8.4 | Maximum: 10.2 |
| Leaks - L/min | Median: 3.8 | 95th percentile: 13.0 | Maximum: 25.2 |
| Events per hour | AI: 0.4 | HI: 0.0 | AHI: 0.4 |
| Apnoea Index | Central: 0.0 | Obstructive: 0.3 | Unknown: 0.1 |
| RERA Index | 0.0 | | |
| Cheyne-Stokes respiration (average duration per night) | 0 minutes (0%) | | |

Usage - hours

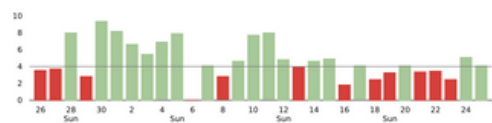

การติดตั้ง

- วางอุปกรณ์บนพื้นผิวที่มีระดับที่มั่นคง
- เสียบขั้วต่อสายไฟที่ด้านหลังของอุปกรณ์ เชื่อมต่อปลั๊กสายไฟ ด้านหนึ่งเข้ากับหน่วยจ่ายไฟ และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
- ต่อท่อลมเข้ากับช่องระบายอากาศที่ด้านหลังของอุปกรณ์อย่างแน่นหนา
- ต่อปลายท่อลมที่วางเข้ากับหน้ากากที่ประกอบแล้วให้แน่น
- ใส่น้ำกลั่นทางการแพทย์ในกระบอกใส่น้ำแล้วใส่เครื่องให้แบบสันนิ
- กด Start/Stop เพื่อเริ่มการใช้งาน

Mode

- CPAP โหมดปล่อยแรงดันคงที่
- Auto APAP โหมดปล่อยแรงดันอัตโนมัติ 4 - 20 cmH2o

อุปกรณ์ที่ได้รับ

- เครื่อง Auto CPAP พร้อมเครื่องทำความชื้นแบบติดตั้งมากับเครื่อง
- ถังใส่น้ำทำความชื้น (HumidAir Cleanable)
- ท่อลมแบบ SlimLine ภายในเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.
- Adapter Power Supply Unit (Support Input range 110 - 240V, 90W)
- กระเป๋าใส่เครื่อง (Travel bag)
- แผ่นกรองแบบ Standard
- SD Card สำหรับบันทึกข้อมูล
- คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย (User Manual EN/TH)



การอ่านผลที่หน้าเครื่อง

- เช้าดู Report การนอนได้ที่ เมนู Sleep Report
- สามารถเอาผลจาก SD Card มาให้อ่านได้โดยการ Zip File ส่ง Line@3nthailand



หมายเหตุ : อ่านค่าเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์



Authorized
Distributor


AirStart 10 APAP

Specifications

- Automatic positive pressure air compressor (Auto CPAP) can set the pressure in the range of 4-20 cmH2O
- **There is no** SmartStart system for automatic operation of the machine. When putting on/taking off the mask
- Color LED screen, automatically adjusts screen brightness
- There is a function to help relieve pressure while exhaling, Expiratory Pressure Relief (EPR) up to 3 cmH2O.
- Symbol showing the tightness of wearing a mask (Mask Seal)
- Sleep report specifies Usage, Leak, Pressure, AI, HI, AHI,
- **Does not support** wireless communication (Wireless module) via 3G/4G telephone networks.
- CPAP machine size: height 116 mm x length 255 mm x width 150 mm
- CPAP machine weight 1208 grams
- The operating sound level of the machine is 26.6 decibels.
- The humidifier comes with a CPAP (HumidAir Cleanable) machine.
- Ramp Time delay timer system from 5 to 45 minutes, **no automatic**
- **Sleep results do not have a detailed report.**

| Therapy | | | | | | |
|--|----------|-----|------------------|------|----------|----------------|
| Pressure - cmH2O | Median: | 5.1 | 95th percentile: | 8.4 | Maximum: | 10.2 |
| Leaks - L/min | Median: | 3.8 | 95th percentile: | 13.0 | Maximum: | 25.2 |
| Events per hour | AI: | 0.4 | HI: | 0.0 | AHI: | 0.4 |
| Apnoea Index | Central: | 0.0 | Obstructive: | 0.3 | Unknown: | 0.1 |
| RERA Index | | | | | | 0.0 |
| Cheyne-Stokes respiration (average duration per night) | | | | | | 0 minutes (0%) |

Usage - hours

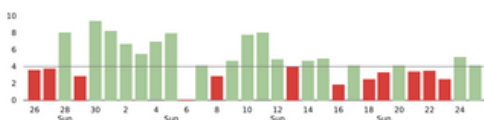

Installation

- Place the device on a stable, level surface.
- Insert the power connector into the back of the device. Connect one end of the wire to the power supply unit. and the other end into an electrical outlet.
- Attach the air hose securely to the vent on the back of the device.
- Attach the free end of the air hose to the assembled mask tightly.
- Put medical distilled water in the water bottle and insert the unit tightly.
- Press Start/Stop to begin use.

Note: Read the warnings on the label and medical device documentation.

Mode

- CPAP constant pressure release mode
- Auto APAP automatic pressure release mode 4 - 20 cmH2o

Received equipment

- Auto CPAP
- HumidAir Cleanable
- SlimLine
- Adapter Power Supply Unit (Support Input range 110 - 240V, 90W)
- Travel bag
- Filter Standard
- SD Card
- User Manual EN/TH



Reading results on the machine

- Access your sleep report at the Sleep Report menu.
- Can take results from SD Card
You can read it by zipping the file and sending it to Line@3nthailand

